

# MECTRON PROFILASSI P3 - LA FORMA IDEALE PER UNA PROFILASSI A 360°




**new!**

mectron

## → NUOVO INSERTO PERIO P3

concepito per una rimozione efficace e delicata della placca e del biofilm batterico sopra e sottogengivale.

- La forma sottile permette un accesso agevole all'interno delle tasche parodontali e degli spazi interprossimali in tutti i quadranti dentali.
- Grazie al movimento lineare compiuto dalla punta, è delicato sui tessuti molli, minimamente invasivo per il cemento della radice e preserva l'epitelio.
- Eccellente per la detersione sottogengivale e interdentale.
- Rimuove in maniera efficace le pigmentazioni estrinseche.
- Offre al clinico un ottimo controllo intraoperatorio e un'ottima precisione a livello interprossimale sia sopra che sottogengivale.
- Trattamento delicato e confortevole per il paziente grazie alla funzione SOFT MODE.

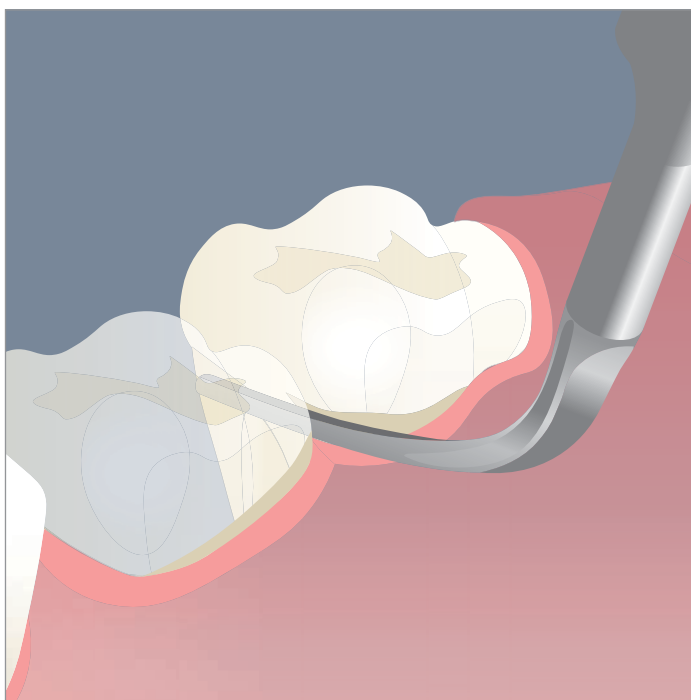


## ✦ CORRETTO UTILIZZO DELL'INSERTO P3

L'inserto compie un movimento lineare che preserva i tessuti molli e il margine gengivale.

La forza applicata dalla punta sul dente deve essere minima.

Suggeriamo di impostare la potenza su un livello basso, con irrigazione di livello medio, attivando laddove disponibile la funzione SOFT MODE che riduce l'ampiezza dell'oscillazione ultrasonica consentendo un movimento delicato, ma efficace.

Tale funzione è un valido ausilio per il clinico, i pazienti più sensibili infatti affrontano con molta più tranquillità i trattamenti a cui vengono sottoposti.

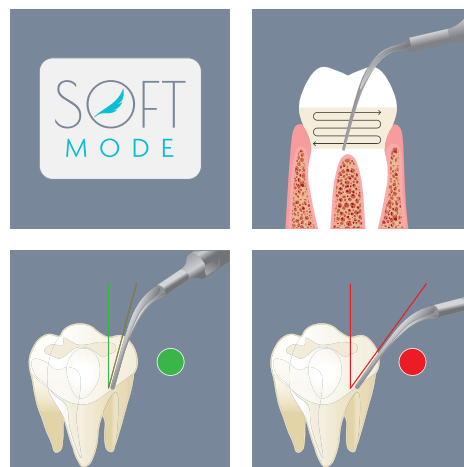

per gentile concessione del Dott. Giacomo Oldoini (La Spezia, Italia)

I nostri referenti clinici ne hanno confermato l'efficacia, la sicurezza ed il comfort in diverse situazioni cliniche:

*“L'inserto è molto sottile e la sua forma allungata permette un agevole accesso ad aree complesse. Molto performante nella rimozione dei biofilm batterici sia in aree sopragengivali che all'interno di tasche parodontali, nel massimo rispetto dei tessuti per un approccio minimamente invasivo. Estremamente interessante anche nel trattamento di pazienti con dispositivi ortodontici fissi: permette infatti un ottimale lavoro senza rischi di compromettere stabilità o integrità dei brackets.”*

Dott. Stefano Checchi, Torino, Italia

*“Il nuovo inserto P3 ha caratteristiche che si prestano sia alla preparazione iniziale, sia al mantenimento parodontale. Lo sviluppo longilineo della parte terminale dell'inserto e la curvatura di questo, facilitano l'accesso in tasca permettendo di trattare siti di differenti profondità e a scarsa accessibilità, anche in fenotipi gengivali molto sottili. Particolarmente indicato per la gestione del biofilm e delle concrezioni minerali subgengivali.”*

Dott. Giacomo Oldoini, La Spezia, Italia

## → L'INSERTO P3 IN DETTAGLIO



### INSERTO P3 Codice 02970003-001

Inserto sottile e liscio come una sonda.

**Indicazioni:** asportazione delicata della placca e del biofilm gengivale a livello interprossimale sia sopra che sottogengivale.

### CHIAVE DINAMOMETRICA K10

Ogni inserto viene fornito con la propria dinamometrica K10 ai fini di ottimizzare l'igiene di studio nonché i tempi di sterilizzazione.



mectron s.p.a.  
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia, tel +39 0185 35361,  
fax +39 0185 351374, [www.mectron.it](http://www.mectron.it), [mectron@mectron.com](mailto:mectron@mectron.com)



© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italia  
Tutti i diritti riservati. Testo, immagini e grafica delle brochure Mectron sono protetti dai diritti d'autore e da altre leggi sui diritti di proprietà. Senza autorizzazione scritta di Mectron S.p.A. il contenuto non può essere copiato, divulgato, modificato o reso accessibile a terzi a scopi commerciali.

**mectron**  
medical technology